

MEGASONEX[®]

Ultradźwiękowa szczoteczka do zębów

Instrukcja

M8 S

Dziękujemy

Dziękujemy za zakup szczoteczki MEGASONEX. Mamy nadzieję, że spełni Twoje oczekiwania.

Przed użyciem uważnie przeczytaj poniższe instrukcje. Podczas korzystania z tego lub innego urządzenia elektrycznego należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

⚠ Zagrożenia Elektryczne ⚠

Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

⚠ Trzymaj ładowarkę, kabel USB i zasilacz USB z dala od wody i innych płynów.

⚠ Nie przechowuj ładowarki, kabla USB i zasilacza USB w miejscu, w którym może wpaść lub zostać wciągnięta do wody lub innego płynu. Jeśli tak się stanie, NIE WOLNO sięgać po ładowarkę. Natychmiast ją odłącz. Odczekaj kilka dni, aż ładowarka, kabel USB i zasilacz USB całkowicie wyschnie przed ponownym użyciem. Gdy tylko woda dostanie się do stacji ładującej, to nawet po jej wyschnięciu prawdopodobnie rozpocznie się korozja wewnętrznych elementów, co może spowodować awarię ładowarki w następnych miesiącach. Uszkodzenie którekolwiek z tych urządzeń z powodu wody nie jest objęte gwarancją.

⚠ Ostrzeżenia ⚠

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub urazów:

⚠ Konieczny jest ścisły nadzór, gdy produkt ten jest używany przez dzieci lub osoby niepełnosprawne. Przerwij używanie, jeśli nie jesteś w stanie prawidłowo obsługiwać szczoteczki.

- ⚠ Używaj szczoteczki tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym poniżej. Nie używaj dodatków innych niż dostarczone przez producenta.
- ⚠ Nie używaj ładowarki szczoteczki, zasilacza USB, rączki lub główki szczoteczki, jeśli są uszkodzone lub jeśli występują w nich jakieś luźne lub uszkodzone elementy. Szczoteczka nie zawiera części nadających się do naprawy.
- ⚠ Wszystkie części należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- ⚠ Nigdy nie używaj kabla USB, jeśli jest uszkodzony.
- ⚠ Odłącz zasilacz USB przed czyszczeniem i upewnij się, że jest suchy przed ponownym podłączeniem go do gniazdka elektrycznego. Nie zanurzaj całkowicie ładowarki, kabla USB lub zasilacza USB w wodzie lub innym płynie.

⚠ Ostrzeżenia medyczne ⚠

- ⚠ Jeśli niedawno przeszedłeś operację jamy ustnej lub dziąseł, przed użyciem tego produktu skonsultuj się ze swoim dentystą.
- ⚠ Skontaktuj się ze swoim dentystą, jeśli podczas używania tego produktu wystąpi nadmierne krwawienie lub niewielkie krwawienie utrzymuje się po tygodniu stosowania.
- ⚠ W przypadku pytań dotyczących korzystania z rozrusznikiem serca lub innego wszczepionego urządzenia, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub producentem wszczepionego urządzenia. Szczoteczka do zębów MEGASONEX została przetestowana i jest zgodna z normami bezpieczeństwa dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych.
- ⚠ Nie używaj, jeśli główka szczoteczki została zgnieciona lub włosie jest wygięte. Uszkodzone włosie może odłamać się podczas szczotkowania.

- ⚠ Jest to produkt do pielęgnacji jamy ustnej przeznaczony do czyszczenia zębów. Nie używaj go do innych celów.
- ⚠ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie był testowany i dlatego nie powinien być stosowany u: pacjentek w ciąży, pacjentów z cukrzycą lub pacjentów z rakiem jamy ustnej.
- ⚠ Zawsze konsultuj się z wykwalifikowanym lekarzem lub dentystą, jeśli nie masz pewności, czy korzystanie z tego urządzenia jest dla Ciebie bezpieczne.
- ⚠ Należy uważać i pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- ⚠ Ze względów sanitarnych przed pierwszym użyciem umyj rączkę i każdą nową główkę szczoteczki wodą z mydłem i nie dziel jej z innymi osobami.

Przewidziane zastosowanie

Szczoteczka MEGASONEX jest przeznaczona do codziennego użytku domowego z wybraną pastą do zębów. Może być z łatwością stosowana przez osoby z aparatami ortodontycznymi, koronami, implantami, licówkami i uzupełnieniami (wypełnieniami) i jest przeznaczona do zwalczania zapalenia dziąseł i tworzenia się płytki nazębnej, które często prowadzą do krwawienia i recesji dziąseł, kamienia nazębnego i próchnicy (ubytków). Pamiętaj, że szczoteczka do zębów MEGASONEX emituje terapeutyczne ultradźwięki, a nie promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak używane przez telefony komórkowe lub wykrywacze metali.

Ładowanie Twojej szczoteczki do zębów

Podłącz kabel do podstawy ładującej, a zasilacz USB do gniazdka elektrycznego. Po umieszczeniu rękojeści szczoteczki na podstawie ładującej, kontrolka zasilania na rękojeści zacznie pulsować na czerwono podczas szybkiego ładowania baterii. Pulsujące czerwone światło zaświeci się na biało, gdy bateria będzie naładowana w około 70%. Następnie ładuje się do 100% przez maksymalnie 18 godzin. Po tym czasie białe światło zgaśnie, a szczoteczka przestanie się ładować w ciągu najbliższych 30 godzin w celu oszczędzania energii elektrycznej. Następnie szczotka się obudzi i może ponownie zacząć się ładować. Nie można jej przelałdować, gdyż bateria przestaje przyjmować energię, gdy jest pełna.

Wyjęcie i włożenie szczoteczki do bazy ładującej spowoduje ponowne uruchomienie mechanizmu ładowania i 18-godzinnego minutnika. Trzymanie szczoteczki w ładowarce po zaświeceniu się białego światła nie spowoduje uszkodzenia szczoteczki.

Szczoteczkę do zębów MEGASONEX należy ładować natychmiast po zakupie przez 18 godzin przed pierwszym użyciem, a następnie, niezależnie od tego, czy jest używana, czy nie, należy ją ładować co najmniej co dwa miesiące. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie baterii i unieważnienie gwarancji.

Pełne naładowanie nowej baterii powinno wystarczyć na około 40 trzy- minutowych użyć. Podobnie jak w przypadku wszystkich baterii, z czasem jej pojemność będzie się zmniejszać, tym samym zmniejszając liczbę użyć na jednym ładowaniu. Mimo, że używamy baterii najnowszej generacji bez pamięci, aby przedłużyć żywotność dowolnej baterii, zalecamy, aby co kilka miesięcy całkowicie rozładować szczoteczkę i ponownie ją naładować przez pełne 18 godzin.

Zasilacz USB jest przeznaczony do zasilania prądem przemiennym 100-240 V, 50-60 Hz. Podczas podróży zagranicznych wystarczy odpowiednia przejściówka do zasilacza.

Uwaga: Podczas ładowania nie należy umieszczać podstawy ładującej na metalowej powierzchni. Twoja ładowarka może być również używana do trzymania szczoteczki do zębów na blacie bez kabla.

Mocowanie główek szczoteczki

Chwyć górną część główki szczoteczki jedną ręką. Drugą ręką przekręć blokadę na szyjce główki szczoteczki w kierunku strzałki o około jedną ósmą obrotu w prawo. Ustaw główkę szczoteczki nad trzonkiem rączki szczoteczki, tak aby włosie znajdowało się po tej samej stronie co przycisk. Wsuń główkę szczoteczki na trzonek, aż pierścień blokujący oprze się na rączce szczotki. Przekręć blokadę na główce szczoteczki w kierunku przeciwnym do kierunku wskazywanego przez strzałkę o około jedną ósmą obrotu w lewo, aby zablokować ją na miejscu.

Zdejmowanie główek szczoteczek

Chwyć górną część rączki szczotki jedną ręką. Drugą ręką przekręć blokadę na szyjce główki szczoteczki w kierunku strzałki o około jedną ósmą obrotu w prawo. Delikatnie zdejmij główkę szczoteczki z trzonka. Pamiętaj, aby odblokować blokadę główki szczoteczki, zanim spróbujesz ją zdjąć. Niezastosowanie się do tego może spowodować fizyczne złamanie rączki szczotki, co nie jest objęte gwarancją. Aby główki szczoteczki pozostały łatwe do zdjęcia, wyjmij je co kilka dni, aby oczyścić mechanizm blokujący i trzonek. W przypadku główek szczoteczki, które stają się trudne do zdjęcia, zalecamy najpierw opukać zamek główki szczoteczki ciepłą wodą, aby zmiękczyć wszelkie naloty pasty do zębów.

Instrukcje dotyczące szczotkowania

Aby uzyskać optymalną wydajność, szczoteczka MEGASONEX powinna być w pełni naładowana. Wykonaj te proste kroki, aby zmaksymalizować skuteczność szczotkowania:

- ① Zwilż włosie pod bieżącą wodą i nałóż pastę na główkę szczoteczki. Aby zapewnić równomierne i dokładne szczotkowanie, podziel w myślach usta na sześć części.
- ② Umieść włosie w tylnej części dolnych zębów pod kątem 45° w linii dziąseł i włącz szczoteczkę. Chwyć rączkę szczoteczki lekkim uchwytem. Unikaj szorowania lub zbyt mocnego dociskania powierzchni zębów do punktu, w którym włosie się wygina. Poruszaj szczoteczka małymi, okrężnymi ruchami, tak aby włosie i płyn dostały się między zęby. Staraj się utrzymywać jak największą ilość wokół włosia. Delikatnie poruszaj szczoteczka obejmując wszystkie powierzchnie każdego zęba, zaczynając od strony policzkowej, następnie od strony żgrzyzowej (w przypadku zębów tylnych), a na końcu od strony językowej. Poświęć kilka sekund na każdy ząb, a następnie przesuń szczoteczka do następnego zęba. Poświęć więcej czasu na delikatne wbijanie włosia w kieszonki dziąsłowe, gdzie płytka nazębna gromadzi się poniżej linii dziąseł. Poproś swojego dentystę o pomoc w zidentyfikowaniu tych obszarów.
- ③ Po 30 sekundach zostaniesz poproszony o przejście do następnej sekcji. Kontynuuj łącznie przez 3 minuty, aż umyjesz wszystkie zęby. Następnie szczoteczka sama się wyłączy.

Wybielanie zębów

Szczoteczka do zębów MEGASONEX pomoże usunąć świeże przebarwienia na powierzchni zębów. Jednak żadna szczoteczka do zębów nie jest w stanie w znaczący sposób usunąć głębokich przebarwień szkliska lub przebarwień zębiny spowodowanych wieloletnimi zaniedbaniami, które mogą wymagać profesjonalnego wybielania.

Wybór i wymiana główek szczoteczek

Niemal wszyscy dentyści zgadzają się obecnie, że szczotkowanie szczoteczką z twardym włosiem może uszkodzić szklivo zębów i podrażnić dziąsła, co może prowadzić do recesji dziąseł. Dlatego polecają delikatne szczoteczki do zębów. Terapeutyczne ultradźwięki są niezwykle delikatne... tak delikatne, że nie sposób zobaczyć ani poczuć ich działania. Jednak twarde włosie może zmartwić ten korzystny efekt. Dlatego oferujemy do wyboru cztery różne rodzaje główek szczoteczki: miękkie i średnie, z włosiem płaskim lub piłoksztalnym.

Nasze główki szczoteczki są zaprojektowane tak, aby zachowywały swój kształt i skuteczność przez około dwa miesiące regularnego stosowania, w zależności od osobistych nawyków.

Wybór prędkości

Urządzenie może pracować w jednym z trzech trybów:

- ① Ultradźwięki i delikatne wibracje dźwiękowe (naciśnij przycisk raz)
 - Ultradźwięki przy 1,6 MHz
 - Wibracje dźwiękowe przy 18.000 ruchów na minutę
- ② Ultradźwięki i wyjątkowo delikatne wibracje dźwiękowe (naciśnij przycisk dwa razy, co pół sekundy)
 - Ultradźwięki przy 1,6 MHz
 - Wibracje dźwiękowe przy 9.000 ruchów na minutę
- ③ Tylko ultradźwięki (naciśnij przycisk trzykrotnie w odstępie pół sekundy)
 - Ultradźwięki przy 1,6 MHz
 - Brak wibracji dźwiękowych (z wyjątkiem interwału minutnika)

Niebieskie światło wskazuje, kiedy emitowane są ultradźwięki.

Czyszczenie i konserwacja

Co kilka dni zdejmij główkę szczoteczki i wyczyść korpus szczoteczki wilgotną szmatką z mydłem. Usuń pozostałości mydła czystą wilgotną szmatką. Całkowite zanurzenie w wodzie nie jest dobrym pomysłem, mimo że części zostały fabrycznie uszczelnione, aby zapobiec przeniknięciu wody.

Okresowo czyść podstawę ładującą, najpierw odłączając ją od zasilacza USB, a następnie wyczyść wilgotną szmatką. Uważaj, aby nie zamoczyć ani nie zanurzyć podstawy ładującej w wodzie. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Każdorazowo po umyciu zębów dobrze jest wypluć główkę szczoteczki w zimnej, czystej wodzie, otrząsnąć z nadmiaru wilgoci oraz osuszyć włosie i rączkę szczoteczki czystym ręcznikiem, ściskając przy tym włosie.

Chronić przed światłem słonecznym lub ultrafioletowymi środkami dezynfekującymi, ponieważ światło UV może z czasem spowodować żółknięcie plastiku, co jest kosmetyczną zmianą nieobjętą gwarancją.

Recykling

Szczoteczka zawiera wysokiej jakości baterię NiMH, która powinna służyć przez wiele lat. Wszelkie naprawy szczoteczki i wyjęcia baterii mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane Centrum Naprawcze MEGASONEX. Otwarcie szczoteczki do zębów lub próba jej modyfikacji lub naprawy przez nieautoryzowany personel spowoduje przerwanie wodoodpornych uszczelek i unieważnienie gwarancji. Pod koniec okresu użytkowania całą szczoteczkę należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektrycznych.



Informacje o gwarancji Trzy lata gwarancji producenta

MEGASONEX ("my", "nas", "nasz") oferuje konsumentom ograniczoną gwarancję producenta ("Gwarancja"), że to urządzenie elektroniczne, z wyłączeniem akcesoriów lub części zamiennych ("Produkt"), jeśli zostanie zakupione od autoryzowanego sprzedawcy MEGASONEX, będzie wolne od wad produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu domowym przez okres trzy (3) lat od daty zakupu detalicznego przez pierwotnego nabywcę końcowego ("Okres Gwarancji").

Aby móc skorzystać z gwarancji, o ile prawo nie stanowi inaczej, musisz posiadać prawdziwy i oryginalny oficjalny paragon wskazujący miejsce i datę zakupu. Jeżeli Produkt dostarczony przez MEGASONEX nie spełnia warunków gwarancji w Okresie Gwarancji, po zwróceniu produktu, MEGASONEX, według własnego uznania, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, naprawi lub wymieni Produkt lub zwróci cenę zakupu.

Niniejsza Gwarancja nie podlega przeniesieniu.

POZA NINIEJSZĄ GWARANCJĄ KAŻDY KONSUMENT MOŻE MIEĆ PRAWA NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA KRAJOWEGO REGULUJĄCEGO SPRZEDAŻ TRWAŁYCH DOBR KONSUMPCYJNYCH. PRAWA TE NIE SĄ DOTNIĘTE PRZEZ TĘ GWARANCJĘ, W CELU SKORZYSTANIA Z TAKICH PRAW, KONSUMENTÓW ZACHĘCA SIĘ RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z PROCEDURY SERWISU GWARANCYJNEGO, KTÓRA JEST OPISANA PONIZEJ.

Wyłączenia gwarancji

(i) Akcesoria lub części zapasowe; główki szczoteczek lub inne materiały eksploatacyjne; (ii) Okoliczności, awarie lub szkody niewynikające z wad produkcyjnych; (iii) Okoliczności, awarie lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji producenta, zalaniem, modyfikacjami, nieautoryzowaną naprawą, zaniedbaniem, wypadkami, kłóskami żywiołowymi, niewłaściwą konserwacją lub modyfikacjami lub wynikającymi z użytkowania z produktami stron trzecich; (iv) Normalne zużycie, w tym pęknięcia, odpryski, zadrapania, otarcia, odbarwienia lub blaknięcie; (v) Kradzież lub utrata; (vi) Uszkodzenie

środowiskowe lub pęknięcie mechaniczne; (vii) Produkty, których oznaczenia lub numer seryjny zostały zmienione lub usunięte; (viii) Produkty, które zostały skradzione, odsprzedane przez nieupoważnione osoby lub w przypadku których nie można przedstawić ważnego dowodu zakupu.

Produkt jest przeznaczony do normalnego użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego, np. w klinice lub salonie. Jest to produkt do higieny osobistej, który nie jest przeznaczony do użytku przez więcej niż jedną osobę w celu uniknięcia potencjalnego zakażenia krzyżowego.

Produkty zamienne uzyskane na bazie gwarancji i naprawy przeprowadzone przez autoryzowany serwis naprawczy MEGASONEX są objęte gwarancją przez 90 dni lub do końca pierwotnego Okresu Gwarancji, w zależności od tego, który jest dłuższy. Naprawy i wymiany nie odnawiają trzy-letniej gwarancji.

Nasze produkty nie są przeznaczone do serwisowania przez użytkownika ani do celów innych niż te, do których są przeznaczone. Wszelkie próby demontażu lub naprawy Produktu przez konsumenta lub jakikolwiek nieautoryzowany personel lub użycie go do celów innych niż zamierzone spowodują unieważnienie niniejszej gwarancji.

Oprócz niniejszej Gwarancji nie udzielamy żadnych gwarancji komercyjnych. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Gwarancji lub gwarantowanych przez obowiązujące przepisy prawa, żrękamy się wszelkich innych wyraźnych i dorozumianych gwarancji. Zaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy MEGASONEX nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, rozszerzeń ani uzupełnień niniejszej Gwarancji.

Procedura serwisu gwarancyjnego

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie gwarancyjne, musisz zgłosić roszczenie gwarancyjne u sprzedawcy, który sprzedał Ci przedmiot. W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem naszych stron internetowych lub w inny sposób bezpośrednio od MEGASONEX, należy najpierw skontaktować się

z nami pod adresem megasonex.com/contact, wpisując w temacie wiadomości "Serwis Gwarancyjny". Aby kwalifikować się do serwisu gwarancyjnego, MEGASONEX lub autoryzowany sprzedawca mogą wymagać udzielenia odpowiedzi na pytania w celu ustalenia, czy produkt wymaga serwisu i przestrzegania wszelkich określonych procedur serwisu gwarancyjnego i instrukcji zwrotu produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, bez odpowiedzialności i odszkodowania, każdej przesyłki zwrotnej bez wyraźnie napisanego kodu zatwierdzenia lub która w inny sposób nie jest zgodna z określonymi przez nas procedurami lub która nie jest poparta rozsądnymi dowodami, że roszczenie jest objęte zakresem i okresem gwarancji.

Będziesz odpowiedzialny za odesłanie każdego zwracanego przedmiotu na własny koszt, w tym pokrycie wszelkich obowiązujących kosztów importu, a my nie zwrócimy tych kosztów za żaden przedmiot, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo. Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących importu i eksportu. Ponieważ ponosisz wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich ceł i podatków związanych z przesyłką zwrotną, zalecamy wyraźne oznaczenie "TOWARY ZWRACANE" na każdej przesyłce zwrotnej.

Możesz wybrać dowolną metodę wysyłki, ale ponieważ nie możemy zagwarantować, że otrzymamy zwrócony przedmiot i, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, w żadnym wypadku nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za zwrócone przedmioty, które zostały utracone lub uszkodzone w transporcie, ani nie zwrócimy żadnych kosztów za przedmiot, którego nie otrzymaliśmy, dlatego zdecydowanie zalecamy skorzystanie z możliwej do śledzenia metody wysyłki, której całkowity koszt jest w pełni pokryty przez ubezpieczenie, aby zachować numer śledzenia do czasu sfinalizowania zwrotu pieniędzy oraz dołączyć Twoje dane kontaktowe i adres zwrotny na przesyłce.

Po otrzymaniu zatwierdzonej przesyłki przeanalizujemy Twoje roszczenie i jeśli uznamy, że Twój produkt jest wadliwy i objęty gwarancją, naprawimy go lub

wymienimy, według naszego uznania, bez żadnych kosztów dla Ciebie. Jesteśmy uprawnieni do nie zwracania żadnego Produktu, jeśli okaże się, że ten Produkt jest podrobiony lub w inny sposób nie został wprowadzony do obrotu przez nas lub za naszą zgodą.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niniejsze zasady i warunki określają pełny zakres naszych zobowiązań. Wszelka odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, pośrednie lub następcze jest wykluczona w zakresie dozwolonym przez prawo.

POZA TO, CO ZAPEWNIĄ OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO, MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MEGASONEX LUB JAKIKOLWIEK JEJ POWIĄZANYCH SPOŁEK, CZYLI W PRZYPADKU DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOŚÓB, W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKT(-Y) I/LUB USŁUGI.

Jeśli którykolwiek z warunków niniejszej gwarancji zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych warunków.

Gwarant

Gwarant na produkty zakupione w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

Adres siedziby firmy: **Panaford BV**
Hoofdweg 52A, 3067GH Rotterdam, Netherlands

Gwarancja obsługiwana przez: **ARS Dental Sp. z o.o.**
ul. Bychowska 51, 04-536 Warszawa +48 (22) 617 81 05

Gwarant na produkty zakupione w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej:
OOO Goldspire Group East
12 Trubnaya Ulitsa, Moscow, Russia 107045

Gwarant na produkty zakupione we wszystkich innych regionach:
Goldspire Group Limited
16/F, Kings Commercial Centre,
25 King's Road, Causeway Bay, Hong Kong

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące użytkowania Twojej szczoteczki do zębów MEGASONEX, odwiedź naszą stronę internetową (megasonex.com) i skorzystaj z formularza kontaktowego online, aby się z nami skontaktować.

Specyfikacja

Częstotliwości robocze

Częstotliwość ultradźwiękowa (z Megacrystal®)

- 1,6 MHz
- = 96 milionów uderzeń na minutę
- = 192 miliony ruchów na minutę

Częstotliwość dźwięku (z silnika elektrycznego)

- 150/75/0 Hz
- = 18.000/9.000/0 ruchów na minutę

Minutnik

Czas szczotkowania

- 3 minuty

Interwały rozrusznika

- 6 × 30 sekund

Materiały

Korpus uchwytu

- ABS (akrylonitryl-butadien-styren)

Przycisk szczoteczki

- Silikon

Korpus główki szczoteczki

- Spożywczy PP (polipropylen)

Włosie główki szczoteczki

- Filament DuPont Tynex (nylon 612)

Zgodny z CE, WEEE i RoHS

Bateria

- 4,8 V NiMH (niklowo-metalowo-wodorkowy)
- 250 mAh

Zużycie na jedno ładowanie (nowe i w pełni naładowane)

- Do 40 trzyminutowych zastosowań
- Około trzy tygodnie

Zasilacz USB

Model

- KT07W050100EU

Wejście z gniazdka ściennego

- 100–240 V AC
- 50–60 Hz
- 200 mA

Wyjście USB

- 5 V DC
- 1 A


Baza ładująca

Model

- M8 S Base

Wejście

- 5 V DC
- 1 A

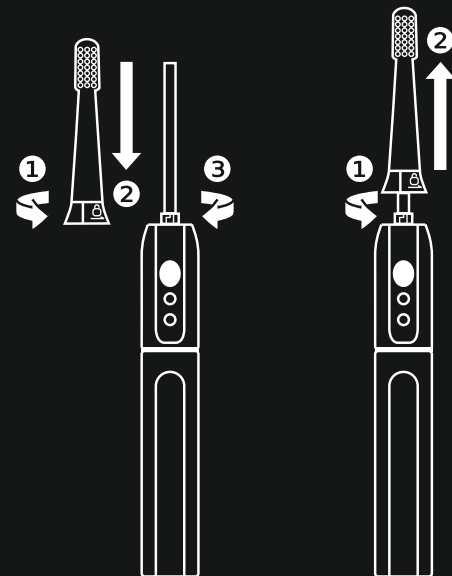

Wszystkie wartości są przybliżone.

Wybielająca Pasta do Zębów z Nano-Hydroksyapatytem

Chociaż szczoteczka do zębów MEGASONEX została zaprojektowana tak, aby dobrze współpracowała z każdą pastą do zębów, zalecamy stosowanie pasty MEGASONEX. Większość past do zębów zawiera silnie pieniącą się środki, takie jak SLS i substancje ściernie. Wyprodukowaliśmy pastę do zębów opartą na zasadzie działania technologii sonicznej i ultradźwiękowej, dzięki czemu możemy pominąć te kontrowersyjne składniki.

W paście do zębów MEGASONEX zostały wykorzystane najnowsze osiągnięcia nauki. Wychodząc poza tradycyjne pasty z fluorem zapobiegające powstawaniu próchnicy zębów stworzyliśmy pastę, która pomaga przyspieszać naturalny proces naprawy szkliwa w jamie ustnej. Pasta MEGASONEX działa dzięki wykorzystaniu bioidentycznych cząsteczek nano-hydroksyapatytu, głównego budulca szkliwa zębów, o bardzo małych rozmiarach cząstek 20-50 nm. Cząsteczki te są w stanie wiązać się ze szkliwem poprzez przyciąganie elektrostatyczne, wypełniając mikroskopijne wgłębienia i szczeliny szkliwa zębów, czyniąc je mocnymi, gładkimi, błyszczącymi i naturalnie bielszymi.

Składniki

Nano-hydroksyapatyt, sorbitol, gliceryna, woda, krzemionka, ksylitol, pirofosforan tetrasodu, metylokokoilotaurynian sodu, mika, dwutlenek tytanu, karboksymetyloceluloza sodu, kwas cytrynowy, sacharyna sodowa, aromat.

Instrukcje Skrobaka do Języka Jak używać

- ① Przed pierwszym użyciem umyj mydłem z wodą, tak jak szczoteczke do zębów.
 - ② Zamontuj i zamocuj skrobak na uchwycie MEGASONEX jak główkę szczoteczki.
 - ③ Wybierz optymalną prędkość, tak jak w przypadku szczoteczki do zębów.
 - ④ Umieść skrobak na $\frac{3}{4}$ długości języka po lewej lub prawej stronie języka. Delikatnie, ale zdecydowanie przesun go w kierunku czubka języka. Powinno to zająć 2-3 sekundy. W razie potrzeby powtórz kilka razy, przepłukując skrobak pomiędzy każdym pociągnięciem.
 - ⑤ Zrób to samo dla drugiej połowy języka.
 - ⑥ W razie potrzeby obróć skrobak o 90° do języka, aby pokryć szerszy obszar czyszczenia.
 - ⑦ Oczyszć i wysusz po każdym użyciu.
- ⚠ Mocniejsze naciskanie na język nie zapewni lepszego usunięcia biofilmu. W rzeczywistości może przynieść więcej szkody niż pożytku. O wiele lepiej jest czyścić język częściej niż czyścić go nadmiernym naciskiem, który może uszkodzić język i doprowadzić do krwawienia, infekcji i innych problemów.


Restrykcje i ograniczenia

- ⚠ Skrobak nie został jeszcze przetestowany i dlatego nie należy go używać u kobiet w ciąży, diabetyków lub osób z podskórnymi urządzeniami elektrycznymi, takimi jak rozruszniki serca.
- ⚠ Jeśli nie masz pewności, czy korzystanie z tego urządzenia jest dla Ciebie bezpieczne, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym lekarzem lub dentystą.
- ⚠ Skrobaka nie należy używać z żadnym innym urządzeniem ani narzędziem poza uchwytem szczoteczki ultradźwiękowej MEGASONEX.
- ⚠ Staraj się unikać samego końca języka, w

którym znajdują się brodawki okolne (krążki 6-12 3-4 mm). Są zaangażowane w trawienie i nie należy ich podrażniać. Dotyczy to wszystkich form czyszczenia języka.

⚠ Podobnie jak w przypadku szczoteczki do zębów, nie udostępniaj skrobaczki do języka innym osobom, aby uniknąć zakażenia krzyżowego.

⚠ Niektóre osoby mają wzmoczony odruch wymiotny. Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia wprowadzanego do ust, wraz z upływem czasu i powtarzającym się, stopniowym, płytkim użyciem odruch ten można zmniejszyć. Osoby te powinny zacząć czyścić tylko przednią część języka, a następnie, wraz z nabieraniem wprawy, powoli zwiększać obszar czyszczenia przez okres tygodni lub nawet miesięcy.

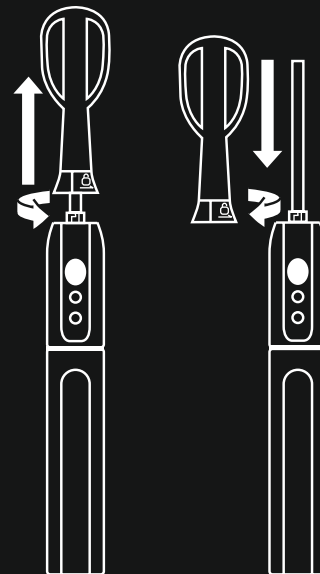

Panaford BV
www.megasonex.com

M8S-IB-2020-06-PL-EU