

# Violife SLIMSONIC – instrukcja obsługi

SLIMSONIC to nowoczesna szczoteczka soniczna emitująca 22 000 ruchów na minutę.

Skutecznie usuwa płytkę nazębną. Już po pierwszym użyciu zęby są czyste a dziąsła zdrowsze.

## Sposób użytkowania

1. Zdjąć górną część etui szczoteczki.
2. Nałożyć pastę na szczoteczkę SLIMSONIC.
3. Włączyć szczoteczkę, naciskając przycisk pośrodku rękojeści szczoteczki.
4. Szczotkować zęby w sposób rekomendowany przez Twojego lekarza stomatologa.
5. Po zakończeniu mycia zębów szczoteczką SLIMSONIC wyłącz ją za pomocą przycisku znajdującego się na środku rękojeści szczoteczki.

## Jak wydłużyć żywotność szczoteczki SLIMSONIC?


1. Po każdym myciu zębów przepłucz główkę czyszczącą szczoteczki pod bieżącą wodą.
2. Usuń pozostałość wody z włosia szczoteczki.
3. Jeżeli przez dłuższy czas nie zamierzasz korzystać ze szczoteczki wyjmij baterię.
4. Przed każdym użyciem szczoteczki SLIMSONIC upewnij się, że szczelnie zamknięta jest część rękojeści, w której znajduje się bateria zasilająca.
5. Nie myj szczoteczki SLIMSONIC (poza główką czyszczącą) pod bieżącą wodą.
6. Szczoteczkę SLIMSONIC przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Główce wymienne

Dostępne są końcówki wymienne do szczoteczki Violife SLIMSONIC, aby dowiedzieć się więcej prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

## Wymiana końcówki czyszczącej

1. Aby odblokować główkę chwycić jedną ręką za rękojeść szczoteczki, a drugą za końcówkę czyszczącą.
2. Przekręć rękojeść szczoteczki w lewą stronę zgodnie z ruchami wskazówek zegara i zdejmij główkę. (jeżeli pominiesz ten krok jest możliwość uszkodzenia szczoteczki).
3. Nałóż nową końcówkę czyszczącą i zablokuj ją przekręcając rękojeść w prawą stronę.

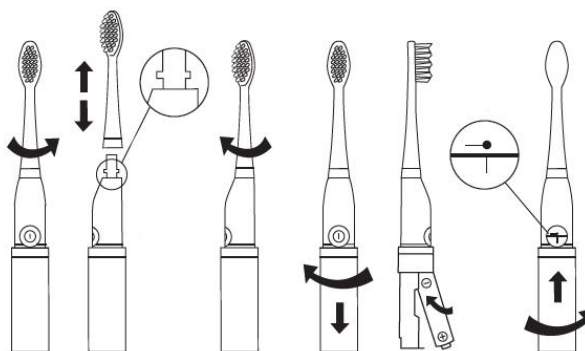

## Wymiana baterii

1. Zalecamy stosowanie baterii alkalicznych.
2. Aby wymienić baterie chwycić obiema rękami za dolną część rękojeści. Jedną ręką przekręć dolną część rękojeści w lewą stronę – odwrotnie do ruchów wskazówek zegara.
3. Wyjmij zużyta baterię, a następnie umieść w szczoteczce nową baterię AAA.
4. Nałóż dolną część obudowy na rękojeść i zablokuj ją przekręcając w prawą stronę - zgodnie z ruchami wskazówek zegara.
5. Słaba bateria może objawiać się mniejszą intensywnością emitowanych ruchów.

## Producent:

Violife Inc. | One Executive Blvd. | Yonkers, NY 10701, customerservice@violife.com, +1 888-882-2367.

## Wyłączy dystrybutor w Polsce:

ARS DENTAL Sp. z o.o., ul. Bychowska 51, 04-536 Warszawa, www.arsdental.pl, info@arsdental.pl, +48 (22) 617-81-05.

## Violife SLIMSONIC – gwarancja

SLIMSONIC to nowoczesna szczoteczka soniczna emitująca 22 000 ruchów na minutę.

Skutecznie usuwa płytkę nazębną. Już po pierwszym użyciu zęby są czyste a dziąsła zdrowsze.

### A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI:

1. Gwarantem jakości urządzenia jest firma **Violife Inc. | One Executive Blvd. | Yonkers, NY 10701, USA.**
2. **Violife Inc.** gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy **Violife Inc.** odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.
3. **Violife Ltd.** ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie **12 miesięcy** od daty jego sprzedaży.
4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do przedstawiciela firmy **Violife Inc.** na Polskę **ARS DENTAL Sp. z o. o., ul. Środkowa 1, 03-430 Warszawa.**
5. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną (w tym przypadku instrukcją), oryginalnym opakowaniem, kompletnym wyposażeniem standardowym. Urządzenie powinno być dostarczone w stanie czystym.

### B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

**ARS DENTAL sp. z o.o.** odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

- stwierdzenia użytkownika urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem,
- dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia z niepełnym wyposażeniem standardowym, bez oryginalnego opakowania,
- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
- wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej.

### C. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają normalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji. Ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak: baterie, główki szczoteczki lub inne końcówki czyszczące.
2. Wady powstałe w wyniku procesu normalnego zużycia/użytkowania urządzenia. W szczególności wady takie jak – odpryski, zadrapania, otarcia, przebarwienia czy wytarcia.
3. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
4. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
6. Uszkodzenia powstałe w wyniku wykonywania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych.

**Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Dz.U. z 2002 r, nr 141, poz. 1176).**

.....  
Sprzedawca (pieczęć firmowa)

## Wypełnia sprzedawca:

Nazwa urządzenia: .....

Nr serii produktu (kolor): .....

Data sprzedaży: .....

Nr dowodu zakupu: .....