

VITAMMY®

HARMONY

SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

Model TB8132-CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór szczoteczki sonicznej VITAMMY HARMONY (TB8132-CE).

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasady dbania o zakupiony produkt oraz przewodnik, jak poprawnie korzystać z urządzenia.


△ Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIA

Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa wraz z poniższymi:

- △ Przeczytaj wszystkie instrukcje dostarczone przez producenta.
- △ Upewnij się, że napięcie sieci elektrycznej jest zgodne z podanym na urządzeniu.
- △ By uniknąć pożaru, porażenia prądem czy innych obrażeń, nie używaj ładowarki w łazience, nie zanurzaj przewodu, wtyczki czy ładowarki w wodzie, ani innych płynach. Nie płucz ładowarki wodą.
- △ Nie używaj ładowarki, jeśli jej przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona.
- △ Odłączając ładowarkę od sieci elektrycznej, chwyć za wtyczkę, nie za przewód. Nie dotykaj wtyczki mokrą dłońią.
- △ W przypadku, gdy ładowarka pod napięciem wpadnie do wody, najpierw odetnij zasilanie i dopiero wtedy wyjmij ładowarkę z wody.
- △ Nie zanurzaj szczoteczki w gorącej wodzie.
- △ To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach psychomotorycznych jedynie po dokładnym instruktażu dotyczącym bezpiecznego posługiwania się tym urządzeniem i po zrozumieniu związanych z jego użytkowaniem ryzyk. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- △ To urządzenie może być używane przez dzieci i osoby niepełnosprawne lub w pobliżu dzieci i osób niepełnosprawnych wyłącznie pod nadzorem.
- △ Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być powierzane dzieciom bez nadzoru osób dorosłych.
- △ Nie przyciskaj szczoteczki do zębów i/lub dziąseł z dużą siłą. Nie myj jednego miejsca przez dłuższy czas, by uniknąć uszkodzenia powierzchni zębów i/lub dziąseł.
- △ Przed każdym użyciem szczoteczki sprawdź, czy nie jest uszkodzona.
- △ Skonsultuj ze swoim stomatologiem, czy możesz bezpiecznie korzystać ze szczoteczki sonicznej, jeśli jesteś po przebytej operacji lub zabiegu dentystycznym.
- △ Na początku używania szczoteczki może pojawiać się krwawienie z dziąseł. Jeśli nie ustąpi po tygodniu stosowania szczoteczki, skonsultuj to z lekarzem.
- △ Jeśli masz rozrusznik serca lub inne elektroniczne implanty, skonsultuj się z lekarzem przed pierwszym użyciem szczoteczki.
- △ Szczoteczka jest przeznaczona do użytku indywidualnego – nie używaj jej razem z innymi ludźmi.
- △ Zaleca się wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.
- △ Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- △ Nie kładź żadnych metalowych przedmiotów na ładowarce by uniknąć pożaru.
- △ Akumulator szczoteczki zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego, dlatego należy zutylizować szczoteczkę zgodnie z przepisami. Nie wyrzucaj szczoteczki ani ładowarki do śmieci.

OPIS URZĄDZENIA

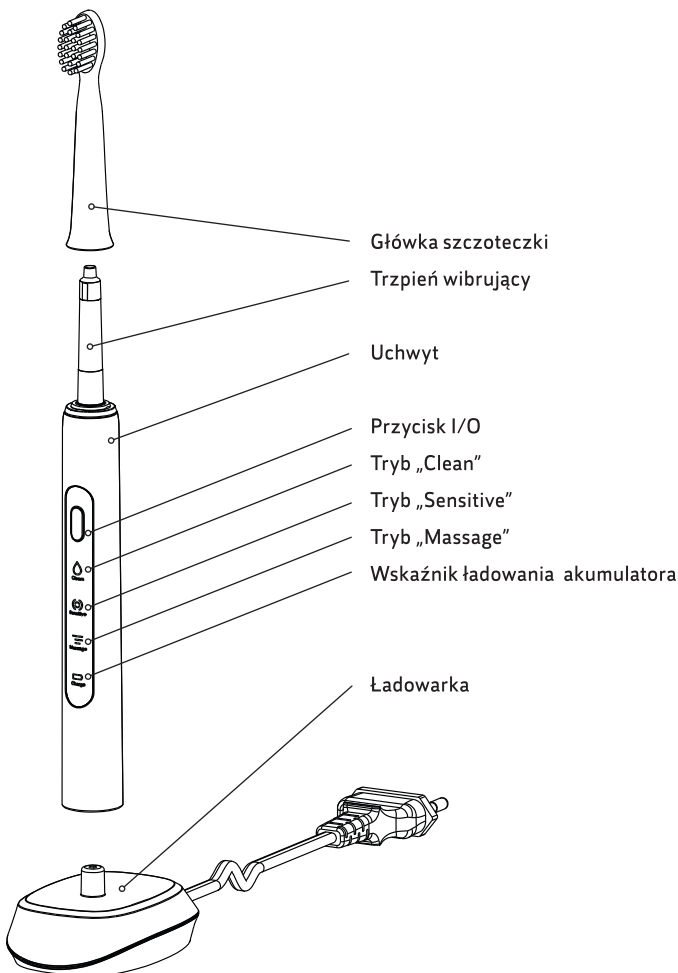

PRZED UŻYCIEM


△ UWAGA! Przed ładowaniem należy wyłączyć szczoteczkę.

PODŁĄCZ ŁADOWARKĘ

1. Ustaw ładowarkę na twardej, płaskiej i suchej powierzchni.
2. Włącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieci elektrycznej.
3. Postaw szczoteczkę na ładowarce tak, by trzpień ładowarki trafił w otwór w spodzie szczoteczki.
4. Wskaźnik ładowania szczoteczki zacznie pulsować na czerwono. Gdy szczoteczka będzie w pełni naładowana, wskaźnik zacznie świecić ciągle na niebiesko.

ZAINSTALUJ GŁÓWKĘ SZCZOTECZKI

1. Załóż główkę szczoteczki zgodnie z rysunkiem obok.

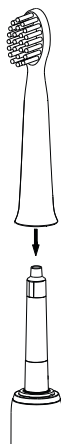

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Nałóż pastę do zębów na **wyłączoną** szczoteczkę.
2. Włóż szczoteczkę do ust i przyłóż włókna szczoteczki do powierzchni zębów.
3. Włącz szczoteczkę przyciskiem I/O i zacznij myć zęby.
- △ UWAGA! Nie przyciskaj przycisków paznokciem, bo możesz w ten sposób uszkodzić powierzchnię przycisków.
4. Szczoteczka będzie działała przez 4 okresy po 30 sekund każdy z krótką przerwą między nimi. Po ostatnim cyklu szczoteczka wyłączy się automatycznie.
5. Po skończeniu opłucz główkę szczoteczki pod bieżącą wodą. Strzepnij nadmiar wody z główki szczoteczki i osusz uchwyt ręcznikiem.
- △ Urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego.

ZMIANA TRYBÓW PRACY

Szczoteczka Vitammy HARMONY wyposażona jest w trzy tryby pracy:

- **Clean:** Codzienne czyszczenie i usuwanie płytki nazębnej (tryb standardowy)
- **Sensitive:** Tryb delikatny dostosowany do wrażliwych zębów, polecany w pierwszych tygodniach używania szczoteczki sonicznej.
- **Massage:** Tryb masażu łączący zmyślenie trybu z ruchami masującymi – stymulacja dziąseł i poprawa ich stanu.

W trakcie pracy zmieniając tryb jej ruchy. Po uruchomieniu urządzenia dziąseł przy przycisku I/O by zmienił tryb pracy w kolejności: Clean → Sensitive → Massage. Szczoteczka zapamięta wybrany tryb i od niego zacznie kolejne mycie.

△ Jeśli szczoteczka rozładuje się, czerwona dioda ładowania zacznie migać. Umieść szczoteczkę na ładowarce i rozpocznij ładowanie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- △ Przed czyszczeniem upewnij się, że pokrywa przedziału baterii jest dobrze zamknięta.
- △ Szczoteczkę i ładowarkę czyść wilgotną, miękką szmatką.
- △ Opłucz całą szczoteczkę pod bieżącą wodą o temperaturze niższej niż 45°C.
- △ UWAGA: Nigdy nie zanurzaj całej szczoteczki w wodzie. Nigdy nie używaj do czyszczenia trujących środków czyszczących.
- △ UWAGA: Do czyszczenia nie używaj żrących środków chemicznych, szorstkich materiałów ściernych czy włókniny stalowej.

Zalecamy wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Przeczytaj instrukcję		Producent
	Prąd stały		Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE
	Data produkcji		Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie nie może być zutylizowane wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny lub oddać w sklepie, gdzie kupisz podobny sprzęt. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację sprzętu. Prawidłowo zutylizowane urządzenie może być poddane recyklingowi, co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie.
SN	Numer seryjny		
	Podwójna izolacja		

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

Lista komponentów:

1. Uchwyt szczoteczki VITAMMY HARMONY (TB8132-CE)
2. 1 końcówka szczoteczki
3. 1 ładowarka
4. Instrukcja Użytkownika

GWARANCJA

URZĄDZENIE	VITAMMY HARMONY (TB8132-CE)	
GWARANT	Novamed.pl Sp. z o.o. S.K.A. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź	
WSPARCIE TECHNICZNE	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl	
GWARANCJA	Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni .	
TYP GWARANCJI	Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.	
OKRES GWARANCJI	24 miesiące na urządzenie Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: końcówki szczoteczki.	
BIEG OKRESU GWARANCJI	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.	
OBSZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI	Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.	
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.	
WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.	
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.) Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu. Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.	
PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY	Data	Podpis klienta

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewni, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

PRODUCENT:

Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

DYSTRYBUTOR:

NOVAMEDPL

Novamed.pl Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66



Produkt posiada certyfikat CE

Wyprodukowano w Chinach / Made in China