


WATERPIK WP-450

INSTRUKCJA OBSŁUGI IRYGATORA WP-450

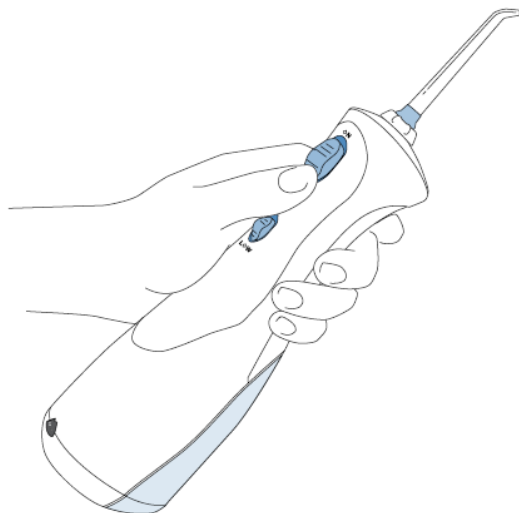

Irygator WATERPIK pomaga utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz usunąć resztki pożywienia i bakterie z tych przestrzeni jamy ustnej, do których normalne środki do płukania i czyszczenia nie mogą dotrzeć.

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY:

1. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
2. Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach.
3. Nie używać podczas kąpieli.
4. Nie stawiać urządzenia w miejscu, z którego może spaść do wanny, umywalki lub kabiny prysznicowej.
5. Nie dotykać urządzenia, które wpadło do jakiegokolwiek płynu. Należy je jak najszybciej wyłączyć z gniazdka.
6. Przed pierwszym użyciem, a następnie okresowo należy sprawdzać, czy przewód sieciowy nie został uszkodzony.

UWAGA! W CELU ZMNIJSZENIA RYZYKA OPARZENIA, PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU, POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB USZKODZEŃ CIAŁA NALEŻY:


1. Nie należy wkładać wtyczki do gniazdka o innym napięciu niż przypisane do tego urządzenia (240V).
2. Nie używać urządzenia w przypadku, gdy: ma uszkodzony przewód, lub wtyczkę, gdy nie funkcjonuje prawidłowo, gdy zostało zniszczone lub upuszczone do płynu. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.
3. Nie należy kierować strumienia wody bezpośrednio pod język, do ucha, nosa ani

do innych, delikatnych miejsc. Urządzenie to jest zdolne do wytworzenia ciśnienia, które może powodować uszkodzenia w tych obszarach. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi, celem zdobycia informacji na temat odpowiedniego używania produktu.






4. Należy używać urządzenie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją lub zalecany przez stomatologa.
5. Używać wyłącznie z końcówkami i akcesoriami zalecanymi przez Waterpik Technologies.
6. Należy napełniać zbiornik wodą lub płynami przepisany przez stomatologa. Płynu należy używać w stosunku 1:1
7. Nie wrzucać lub wkładać żadnych obcych przedmiotów do otwartego urządzenia.
8. Należy trzymać przewód, urządzenie i ładowarkę z daleka od nagrzewanych powierzchni.
9. Nie włączać ani nie używać w miejscu, gdzie stosowany jest tlen lub preparaty w aerozolu.
10. Nie używać płynów do ust/ płukanek zawierających Jod, wybielacze lub olejki eteryczne.
11. Przed zastosowaniem urządzenia powinno się usunąć biżuterię z jamy ustnej.
12. Nie należy używać urządzenia w przypadku posiadania ran w jamie ustnej.
13. Jeśli lekarz zalecił przyjmowanie antybiotyku przed wykonywaniem wszelkich czynności dentystycznych, należy skonsultować się ze stomatologiem przed użyciem tego urządzenia.
14. Do użytku domowego. Nie należy używać poza domem.
15. Należy dokładnie poinstruować dzieci oraz osoby specjalnej troski o właściwym sposobie użytkowania. Należy nadzorować dzieci, tak by nie bawiły się urządzeniem.

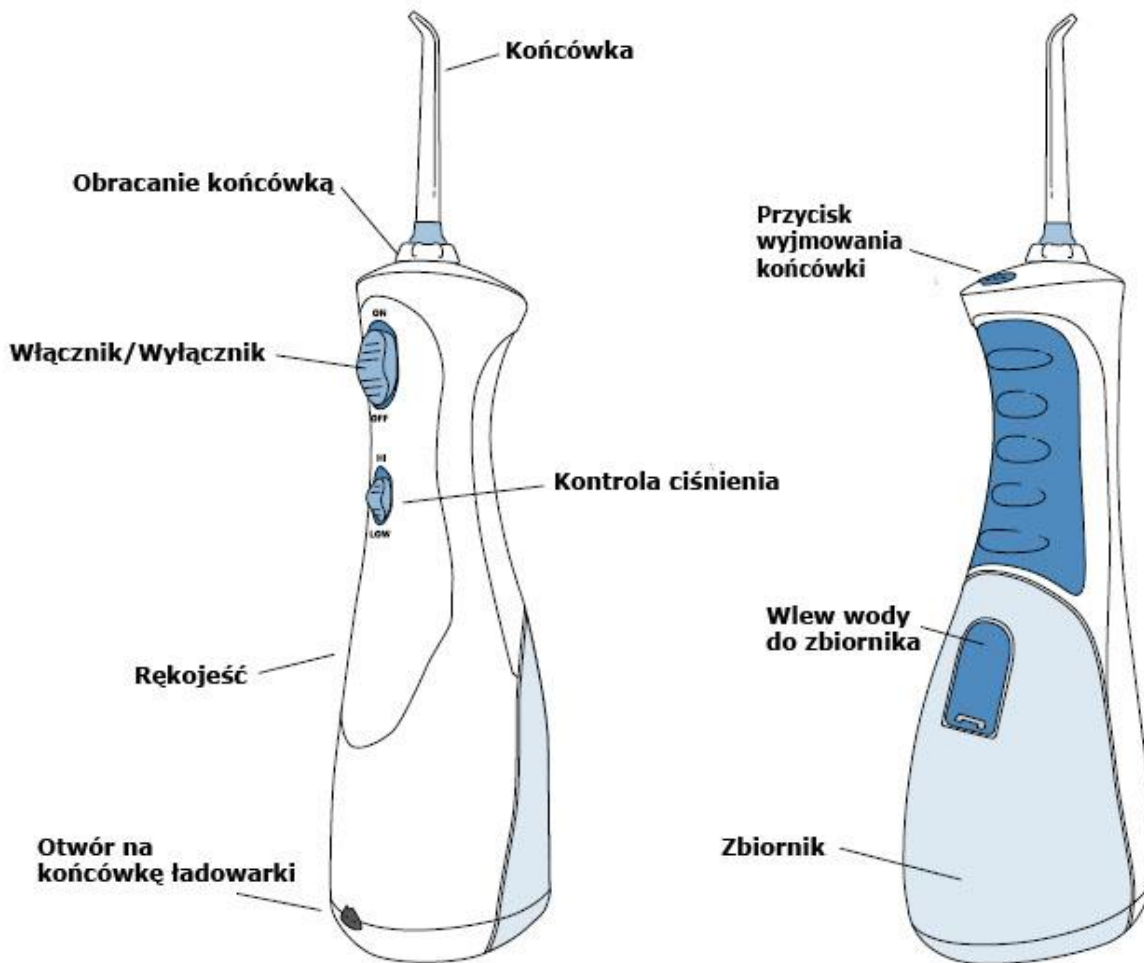NALEŻY ZACHOWAĆ TĄ INSTRUKCJĘ.

OPIS PRODUKTU



DOSTĘPNE KOŃCÓWKI

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Classic JT-100e | Plaque Seeker PS-100E | Orthodontic OD-100E | Pik Pocket PP-100E | Tongue Cleaner TB-100E |
| Końcówka klasyczna | Końcówka do implantów mostów i koron | Końcówka do aparatów ortodontycznych | Końcówka do kieszonek dziąsłowych | Końcówka do języka |
| Zalecana wymiana, co 6 miesięcy | Zalecana wymiana, co 3 miesiące | Zalecana wymiana, co 3 miesiące | Zalecana wymiana, co 3 miesiące | Zalecana wymiana, co 6 miesięcy |


*nie wszystkie modele urządzeń zawierają powyższe końcówki

Końcówki można zakupić w sklepie Estetic Dent www.estetic-dent-sklep.pl

WAŻNE! ŁADUJ IRYGATOR PRZEZ 24 GODZINY PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM. Włącz wtyczkę do gniazdka. Przed ładowaniem upewnij się, że włącznik/wyłącznik jest ustawiony na pozycji (0). Urządzenie nie będzie się ładowało, jeśli włącznik/wyłącznik będzie na pozycji (I). Po naładowaniu akumulator będzie działał przez dwa tygodnie w zależności od użytkowania.


NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

Otwórz wlew zbiornika i wypełnij zbiornik letnią wodą. Odłącz urządzenie od ładowarki przed napełnieniem zbiornika.

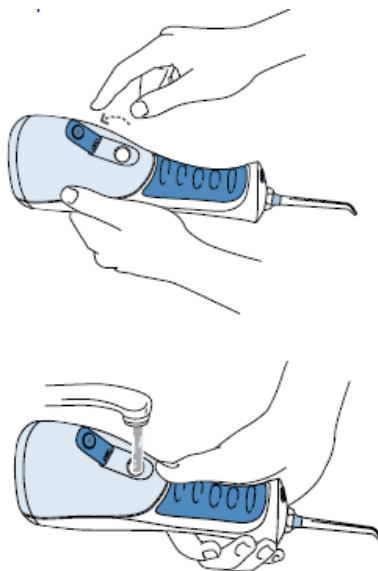


WKŁADANIE I WYJMOWANIE KOŃCÓWEK

Włóż końcówkę w otwór na rękojeści, by wyjąć końcówkę naciśnij przycisk do wyjmowania końcówek znajdujący się na rękojeści.

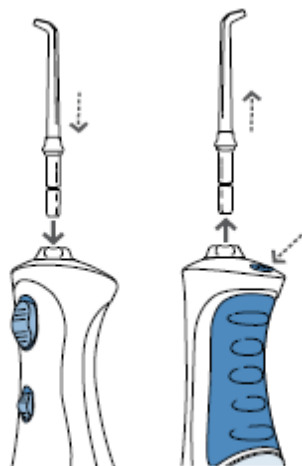


USTAWIANIE CIŚNIENIA

Możesz dostosować ciśnienie irygatora do potrzeb poprzez przesunięcie przycisku kontroli ciśnienia. Ustaw przycisk kontroli ciśnienia na pozycję I, by uzyskać delikatne ciśnienie, albo na pozycję II, by uzyskać wyższe ciśnienie i dokładniejsze czyszczenie.


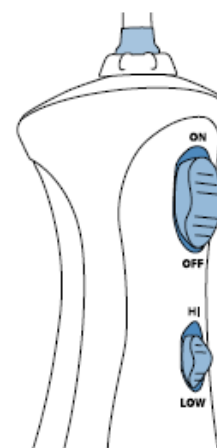


Trzymaj irygator pionowo, by uzyskać najlepsze wyniki. By skierować strumień w konkretne miejsce przekręć pokrętko na górze rączki.

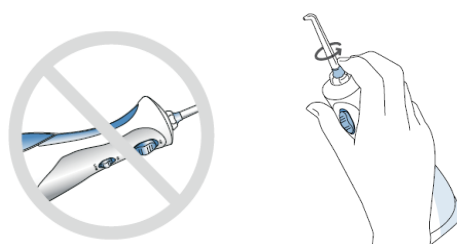

ZALECANA TECHNIKA UŻYCIA

Skierować strumień pod kątem 90 stopni do linii dziąseł. Blisko ust, by uniknąć chlapania wodą, ale tak, by woda mogła swobodnie przepływać z ust do zlewu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zacząć od tylnych części jamy ustnej i płynnie przechodzić w kierunku przednich. Przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł i zatrzymując ruch, na krótko, między zębami. Kontynuuj proces, dopóki nie oczyścisz wewnątrz i na zewnątrz zarówno górne, jak i dolne zęby.

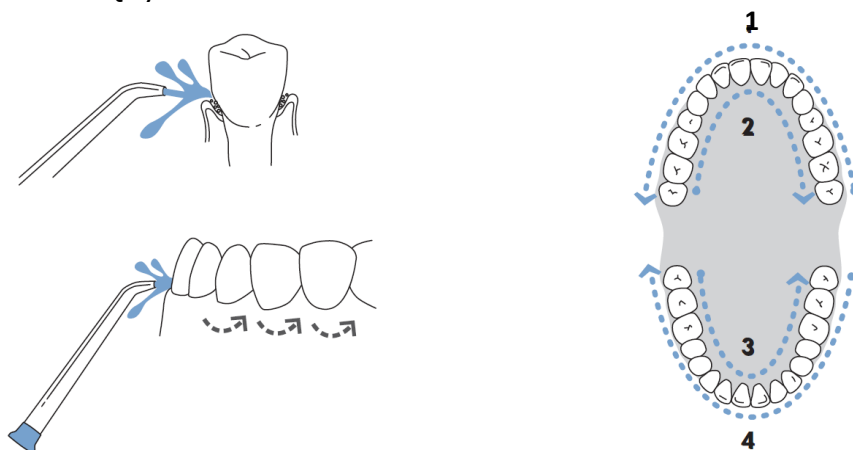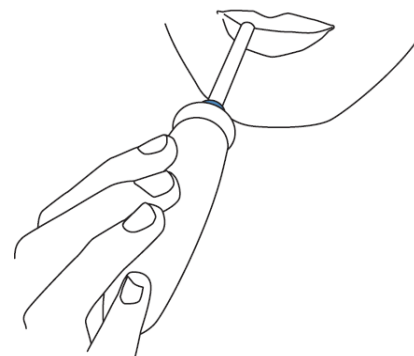


UŻYWANIE PŁYNÓW DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ I INNYCH SPECYFIKÓW

Twój Waterpik® może być używany do dostarczania do jamy ustnej płynu do płukania lub innych przeciwbakteryjnych rozwiązań. Zwróć się do stomatologa, by zalecił odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie. Uwaga: korzystanie z niektórych antybakteryjnych kosmetyków może skrócić żywotność urządzenia.


Po użyciu płynu do płukania lub innego specyfiku w zbiorniku należy go dokładnie wypłukać ciepłą wodą z kranu (następnie przepłukać przewody wypełniając połowę zbiornika ciepłą wodą, kierując końcówkę w stronę kranu i włączając urządzenie na tak długo, by opróżnić pojemnik).

ZAKOŃCZENIE PRACY

Po zakończeniu irygacji wyłącz urządzenie (ustaw WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK na pozycji 0) i opróżnij pojemnik.

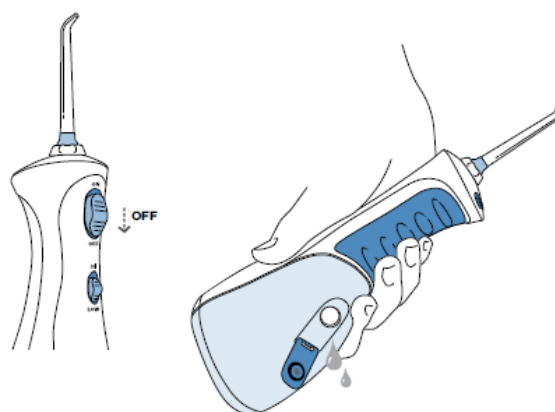

Zbiornik można wyjąć z rękojeści. Czyni się to poprzez przesunięcie zatrzasku znajdującego się na dole rękojeści, równocześnie wysuwając zbiornik. By umieścić zbiornik z powrotem w rękojeści wsuń go w to samo miejsce, usłyszysz zamykany zatrzask, kiedy zbiornik będzie poprawnie zamontowany.

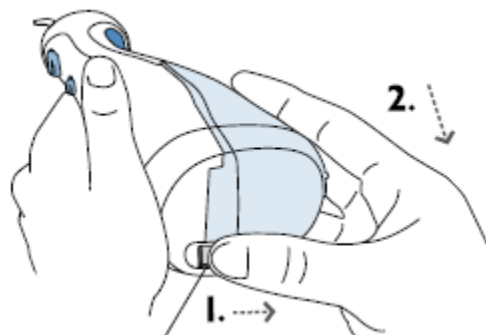

UŻYWANIE KOŃCÓWEK

Końcówka PikPocket™ PP-100 zaprojektowane, by jak najdokładniej czyścić kieszenie dziąsłowe. Dzięki delikatnej końcówce zakończonej gumową nakładką nie ma ryzyka uszkodzenia dziąseł. Umożliwiają proste i skuteczne wprowadzenie roztworu leczniczego bezpośrednio pod linię dziąseł lub do kieszeni przyzębowych. By prawidłowo użyć końcówki PikPocket należy umieścić gumową końcówkę przy zębie pod kątem 45-stopni, a następnie delikatnie przysunąć do linii dziąseł i kontynuować wzdłuż niej. Włączyć urządzenie, wcześniej ustawiając na najniższe ciśnienie (z tą końcówką można korzystać wyłącznie z najniższego ciśnienia).




Końcówka Tongue Cleaner TC-100, do języka: należy umieścić końcówkę na języku, a następnie włączyć irygator korzystając z najniższego poziomu ciśnienia (można zwiększyć je w trakcie czyszczenia). Umieść końcówkę na środku języka i delikatnie przyciskając, przesuwaj ją w stronę otworu gębowego.



Końcówka Orthodontic OD-100, ortodontyczna zaprojektowana

tak, by równocześnie szczotkować i strumieniem wody pod ciśnieniem usuwać trudno dostępne zanieczyszczenia z klamerek aparatu. Należy rozpocząć czyszczenie od tylnych zębów, umieszczając końcówkę pod kątem 90-stopni do zębów. Delikatnie przesuwaj wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na krótko, by delikatnie szczotkować powierzchnię aparatu i przestrzenie międzyzębowe. Tak postąpić z każdym zębem, zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej.

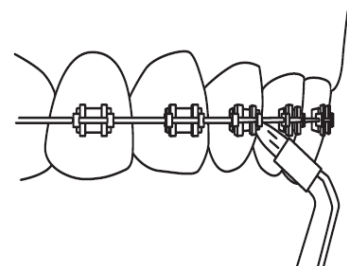

Końcówka Toothbrush TB-100, szczoteczka: Umieścić końcówkę w ustach główką na zębach i linii dziąseł.

Szczoteczka może być stosowana z lub bez pasty do zębów. Włącz urządzenie, tak by woda przepływała przez środek końcówki. Stosując lekki nacisk (włosie nie powinno być wygięte) ruszaj szczoteczką po zębach w przód i w tył. Powtórz z każdym zębem zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej. Woda będzie przepływać przez środek szczoteczki, aby wspomóc jednocześnie czyszczenie i płukanie powierzchni zęba.



Końcówka Plaque Seeker® PS-100 do implantów, koron, mostów: umieść końcówkę pod kątem 90-stopni do linii dziąseł. Zaczynj czyszczenie od tylnych zębów, przesuważ się w kierunku przednich. Umieścić końcówkę blisko zębów tak, aby włosie delikatnie dotykało zębów. Delikatnie przesuważ końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na krótko między zębami delikatnie myjąc powierzchnię włosiem i pozwalając wodzie płynąć między zębami. Powtórz z każdym zębem zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej.



DBANIE O IRYGATOR

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Jeśli to konieczne przetrzyj rękojeść miękką ściereczką. Przed czyszczeniem koniecznie odłącz urządzenie od ładowarki. Przed umieszczeniem urządzenia w temperaturze poniżej 0 stopni, należy wyjąć zbiornik i wyczerpać akumulator.

AKUMULATOR

- Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 24 godziny.
- Żeby naładować akumulator podłącz ładowarkę do prądu. Upewnij się, że przed rozpoczęciem ładowania włącznik/wyłącznik jest na pozycji (0).
- Jeśli używasz irygatora raz dziennie, bądź rzadziej, ładuj go raz w tygodniu przez noc. Jeśli używasz irygatora częściej ładuj go częściej. Nie doprowadzaj do całkowitego wyładowania baterii, może to skrócić żywotność akumulatora i stworzy konieczność ładowania go przez 24 godziny.
- Jeśli irygator ma być przechowywany i nieużywany przez dłuższy okres czasu, przed tym ładuj go przez 24 godziny.
- By wydłużyć żywotność akumulatora ładowarka może być podłączona do urządzenia przez cały czas (z wyjątkiem czasu, w którym urządzenie jest używane).
- Urządzenie zawiera akumulator Niklowo Metalowo Wodorkowy. Po całkowitym zużyciu akumulatora należy utylizować go zgodnie z wymogami recyklingu. Akumulator nie jest wymienny.
- Irygator nie wymaga przeglądów technicznych.

MOŻLIWE PROBLEMY:

| Problem | Przyczyna | Możliwe rozwiązanie |
|------------------------------------|---|---|
| Przeciek między końcówką, a rączką | Końcówka nie jest włożona prawidłowo | Wyjmij końcówkę i włoż ją ponownie dociskając |
| Przeciek w pojemniku | Zbiornik nie jest właściwie umieszczony w rękojeści | Wyjmij zbiornik i zainstaluj go ponownie |
| Nieprawidłowe ciśnienie | Urządzenie nie jest w prawidłowej pozycji/Nie ma wystarczającej ilości wody w zbiorniku/połączenie zbiornika jest zatkane kamieniem | Używaj urządzenia w pozycji pionowej/Dolej wody do zbiornika/Do zbiornika wlej łyżkę octu, dopełnij wodą, a następnie włącz urządzenie kierując strumień do umywalki, przepłucz zbiornik wodą |
| Urządzenie się nie ładuje | Gniazdko prądu nie działa/Włącznik/wyłącznik na rękojeści jest na pozycji (I) | Upewnij się, że gniazdko działa prawidłowo/Przełącz włącznik na pozycję (0) |
| Urządzenie się nie włącza | Rękojeść jest wyładowana | Ładuj rękojeść przez 24 godziny. |

*aby przedłużyć żywotność urządzenia poleca się je odkamieniać raz w miesiącu



ESTETIC DENT
artykuły do higieny jamy ustnej