


PL / ENG



### ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA SONICZNA 360. DLA DZIECI W KRZTAŁCIE LITERY U 360 ELECTRIC SONIC U-SHAPED BRUSH FOR KIDS

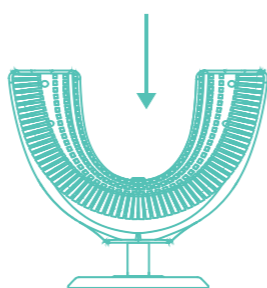


#### KROK 1 STEP 1

Nalóż silikonową główkę szczoteczki lub standardową końcówkę na metalowy wał wyjściowy korpusu. Następnie docisnąć w dół.

Attach a silicone brush head or a standard one end onto the metal output shaft of the body. Then press down.

1

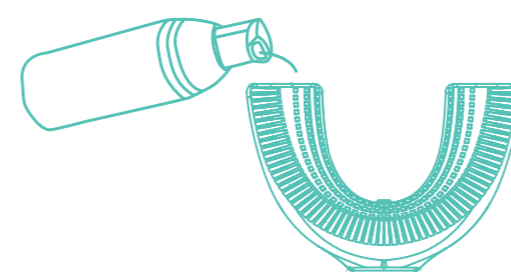

#### KROK 2 STEP 2

Nalóż pastę do mycia zębów lub piankę. Pastę do zębów rozprowadź po górnej i dolnej części silikonowej główki szczoteczki.

Apply toothpaste or foam. Toothpaste spread over the top and bottom of the silicone head brushes.

2

#### URUCHAMIANIE I TRYBY PRACY / STARTUP AND OPERATING MODES URUCHAMIANIE SZCZOTECZKI:

Kliknij 1 raz przycisk "power" z tyłu szczoteczki - szczoteczka się uruchomi Trybie 1 ( kolor podświetlenia niebieski). / Click the "power" button on the back of the toothbrush once - the toothbrush will turn on in Mode 1 (blue backlight).

#### KROK 3 STEP 3

#### KOLEJNE KLIKNIĘCIE ZMIENIA TRYBY PRACY:

Tryb 1: Komfortowe mycie zębów ( kolor niebieski )  
Tryb 2: Mocne mycie zębów ( kolor czerwony )  
Tryb 3: Masaż o wysokiej częstotliwości ( kolor niebieski )

#### NEXT CLICK CHANGES MODES:

Mode 1: Comfortable tooth brushing (blue)  
Mode 2: Powerful tooth brushing (red)  
Mode 3: High-frequency massage (blue)

Szczoteczka na każdym trybie pracuje ok. 50s. W każdym momencie można zmienić tryb pracy. The toothbrush works for about 50 seconds in each mode. You can change the mode at any time.

#### WYŁĄCZANIE SZCZOTECZKI: / TURNING OFF THE TOOTHBRUSH

Aby wyłączyć szczoteczkę przytrzymaj przycisk „power” przez ok. 2s. To turn off the toothbrush, hold down the „power” button for about 2 seconds.

3

**Wskazówki: Szczotkowanie soniczne 360 w 2 minuty**



#### KROK 4 STEP 4

**Wskazówka:** Szczotkowanie soniczne za pomocą końcówki 360. / **Tips:** Sonic brushing with the 360 tip.

Używając końcówkę 360 poruszaj szczoteczką w lewo i prawo. / Using the 360 tip, move the brush left and right.

Włączyć szczoteczkę i wybrać tryb pracy. Następnie umieścić szczoteczkę w jamie ustnej. Aby skutecznie umyć zęby poruszaj szczoteczką zgodnie z rysunkiem w lewo i prawo aby dotrzeć do dalszych zębów. Mycie powinno trwać minimum 2 minuty.



Ręczna vibracja w lewo i prawo.

Turn on the toothbrush and select the operating mode. Then place the brush in your mouth. To brush your teeth effectively, move the toothbrush in a straight line with the drawing left and right to reach further teeth. Washing should take at least 2 minutes.

4

#### INFORMACJE UŻYTKOWE

Szczoteczka soniczna posiada klasę wodoodporności, która pozwala na przypadkowe ochłapanie wodą oraz delikatne mycie.

#### USE INFORMATION

The sonic toothbrush has a water resistance class that allows for accidental splashing of water and gentle washing.

#### KROK 5 STEP 5



5

#### BUDOWA SZCZOTECZKI SONICZNEJ CONSTRUCTION OF THE SONIC TOOTHBRUSH

#### BUDOWA PRODUKTU PRODUCT STRUCTURE

1. Silikonowa główka szczoteczki w kształcie litery U. U-shaped silicone brush head.
2. Dioda LED / LED
3. Przycisk "Power" / Zmiana trybu pracy "Power" button / Changing the operating mode.
4. Wejście ładowarki Charger input



6

1. Główka szczoteczki wykonana jest z miękkiego silikonu przeznaczonego do kontaktu z żywnością. The brush head is made of soft food grade silicone.

#### PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU PRODUCT INTRODUCTION

Ładowanie przez dostarczony kabel USB: szybkie ładowanie trwa do 60 minut i wystarcza na około 10 dni użytkowania. Podczas ładowania dioda LED miga na czerwono. Po naładowaniu zapala się na niebiesko. / Charging via the supplied USB cable: Fast charging takes up to 60 minutes and lasts for about 10 days of use. The LED flashes red while charging. It lights up blue when charged.

#### PARAMETRY PRODUKTU / PRODUCT PARAMETERS:

Nazwa produktu: Elektryczna szczoteczka soniczna 360 model: ES3. / Product name: 360 sonic electric toothbrush model: ES3  
Rozmiar produktu: 30.44\*20.25\*3.85(mm) / Product Size: 30.44\*20.25\*3.85(mm)  
Napięcie znamionowe: 5,0V / Rated voltage: 5.0V  
Prąd roboczy: 5,0V: 0,38A / Operating current: 5.0V: 0.38A  
Waga produktu: około 200g / Product weight: about 200g  
Czas ładowania: <60minut / Charging time: <60 minutes  
Moc znamionowa: 1 W / Rated power: 1 W

7